

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II

Quick Start Guide

CS



■ *Než začnete: důležité varování*

► **Než začnete prosíme, přečtěte si následující upozornění:**

1. Před každým použitím pečlivě prohlédněte lázeňský přístroj i nástavce. Ujistěte se, že na nich nejsou žádné hrubé nebo poškozené plochy, ostré hrany ani bubliny. Pokud si všimnete čehokoliv neobvyklého, přístroj nepoužívejte a kontaktujte svou místní pobočku společnosti Nu Skin. Ukládejte na suchém místě při pokojové teplotě, minimálně však při 4 °C, aby se předešlo možnému vzniku bublin.
2. Tento kosmetický přístroj nemusí být vhodný pro každý věk a typ pokožky. Přístroj ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II je určen k použití pouze na zdravou pokožku. **Nepoužívejte** na pokožku s vyrážkou, popraskané žilky nebo na zanícená místa či otevřené rány. **Nepoužívejte**, pokud jste náchylní na růžovku, trpíte alergií na kovy nebo máte problematickou či přecitlivělou pokožku. Před použitím přístroje Nu Skin Galvanic Spa System® II se poraďte se svým lékařem, pokud máte přecitlivělou pokožku, kožní onemocnění, jste v jiném stavu, máte kardiostimulátor či podobný přístroj, trpíte epilepsií, nosíte kovová zubní rovnátka, máte kovový implantát, nebo v případě nemoci.
3. Nenanášejte přímo na rty, oči či oční víčka. Přístroj a přípravky jsou určeny pouze k zevnímu použití. Pokud se objeví nepřírozené zarudnutí pokožky, přestaňte přístroj okamžitě používat. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Noví uživatelé Nu Skin Galvanic Spa System® II a lidé s citlivou pokožkou či s pokožkou náchylnou na alergie by vždy měli podle návodu produkt vyzkoušet na malé oblasti pokožky.
5. Používejte produkt pouze k určenému použití tak, jak je popsáno v uživatelské příručce. **Nepoužívejte** déle než po doporučenou dobu nebo častěji než je uvedeno v této příručce „Začínáme“.
6. Před prvním použitím odstraňte všechny ochranné fólie.
7. Abyste snížili riziko šoku, popálení, požáru či poranění: neponořujte přístroj do vody; neumísťujte ani neskladujte přístroj tam, kde je riziko pádu či vtažení přístroje do vany, umyvadla nebo záchodové mísy; npracujte s přístrojem, pokud byl poškozen; nepoužívejte přístroj jakýmkoli způsobem, který není popsán v uživatelské příručce.
8. Budete-li sundávat nástavec, nestlačujte ani nedržte střed nástavce, neboť by to mohlo zamezit činnosti uvolňovacího mechanismu. Uchopte za strany přístroje.
9. Cílem této příručky není vám poskytnout veškeré informace potřebné k provozu vašeho přístroje či k provádění péče. Před prvním použitím vašeho přístroje Nu Skin Galvanic Spa System® II a doplňkových produktů si přečtěte celou uživatelskou příručku umístěnou na CD-ROMu, který je dodáván společně s s přístrojem, nebo v knihovně Office.

■ **Obrázky a popis pro Nu Skin Galvanic Spa System® II**

► **Součásti, výměnné nástavce a ikony na displeji přístroje ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II**

Prosíme, otočte na stranu 103, kde naleznete obrázky k následujícímu popisu.

Součásti přístroje:

- | | | |
|---|---|---|
| (1) Receptor výměnného nástavce | (4) Tlačítko pro volby | (6) Prostor pro baterie (dvě baterie AAA jsou již vloženy) |
| (2) Uvolňovací tlačítko výměnného nástavce | (5) Chromová destička pro aktivaci | (7) Indikátor pozice výměnného nástavce (malá drážka) |
| (3) Displej | | |




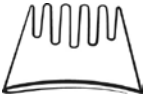
Výměnné nástavce:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (8) ageLOC® nástavec na obličej | (10) Nástavec na tělo |
| (9) Nástavec pro těžce dostupná místa | (11) Nástavec na pokožku hlavy |

Ikony na displeji přístroje:

- (12)** Číslice 1, 2, 3, 4 nebo 5 ukazují číslo aplikace a odpovídajícího produktu.
- (13)** Hodiny a číslice ukazují délku aplikace (2, 3 nebo 5 minut).
- (14)** Během aplikace „2.“ (Nu Skin Galvanic Spa System® II Facial Treatment Gel) jsou zobrazeny kroužky ageLOC® v horní části displeje, napravo od čísla aplikace.
- (15)** Pokud jsou téměř vybité baterie, při každém zapnutí přístroje se uprostřed displeje objeví „0“, která bude blikat čtyřikrát, dokud nebudou baterie vyměněny.

► Číslo aplikace, které je zobrazeno na displeji odpovídá každému produktu následovně:

aplikace	Číslo aplikace	Produkt*	Délka ošetření**	Frekvence používání
	1	Nu Skin Galvanic Spa System® II Facial Pre-treat Gel (předošetřující pleťový gel)	2 minuty	2-3 krát za týden
	2	Nu Skin Galvanic Spa System® II Facial Treatment Gel (ošetřující pleťový gel)	3 minuty	2-3 krát za týden
	3	Tru Face® Line Corrector (korektor linií)	5 minut***	Každý den, ráno a večer
	4	ageLOC® Body Shaping Gel (gel pro formování postavy)	5 minut***	2 dny v týdnu (pokaždé ráno a večer)
	5	Nutriol® Hair Fitness Treatment (vyživující kúra pro zdraví vlasů)	2 minuty	3 krát za týden

*Jiné produkty, kromě produktů jmenovaných v tabulce, nejsou s přístrojem ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II kompatibilní.

**Noví uživatelé Nu Skin Galvanic Spa System® II by měli vyzkoušet podráždění na malé, nenápadné oblasti pokožky. Lidé s citlivou pokožkou by měli aplikaci provádět kratší dobu.

***Pět minut je doporučená doba aplikace na celý obličej/tělo. Je možné péči provádět kratší dobu v závislosti na velikosti ošetřovaného místa. Pracujte opatrně, pokud přístroj používáte na citlivá místa (např. v okolí očí, kde je doporučená doba použití 1-2 minuty).

Nepoužívejte déle než je výše doporučená doba a frekvence. Rádi bychom vás upozornili, že produkty určené pro použití s Vaším přístrojem ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II jsou prodávány samostatně.





■ Podrobný návod

► Jak používat váš přístroj ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II

1. Upevnění nástavce:

Ujistěte se, že jste odstranili plastovou folii z přední i zadní části přístroje Nu Skin Galvanic Spa System® II, jinak nebude aplikace fungovat. Držte přístroj displejem nahoru a nástavec s indikátorem pozice (malá drážka) směrem k sobě. Nástavec pevně přitlačte na přístroj, dokud nezaklapne.

2. Aplikace produktu:

	Nu Skin Galvanic Spa System® II Facial Gels (pleťové gely)	Odstříhněte špičku Facial Pre-Treat Gel (předošetřujícího gelu) na obličej a vymáčkněte celý obsah ampulky do své dlaně. Naneste na obličej a krk. Nevrtějte. Proces opakujte i pro Facial Treatment Gel (ošetřující gel).
	Tru Face® Line Corrector (korektor linií)	Naneste dostatečné množství produktu vždy jen na jedno cílové místo, např. oblast očí, čelo, nos nebo okolí úst. Nevrtějte.
	ageLOC® Body Shaping Gel (gel na formování postavy)	Naneste dostatečné množství produktu vždy jen na jedno cílové místo, např. paže, nohy, stehna nebo hýždě. Nevrtějte.
	Nutriol® Hair Fitness Treatment (vyživující kúra pro zdraví vlasů)	Po aktivaci produktu*, aplikujte rovnoměrně tak, že stlačíte aplikátor a naneseťe vždy najednou pár kapek na pokožku hlavy, dokud není ampulka prázdná.

* Způsob aktivace naleznete v návodu, který jste dostali společně s Nutriol® Hair Fitness Treatment.

3. Volba aplikace:

Přístroj zapnete jedním stisknutím tlačítka pro volby. Číslo aplikace se zobrazí uprostřed displeje a délka aplikace se zobrazí pod číslem aplikace. Stiskněte tlačítko pro volby tolikrát, kolikrát potřebujete, abyste se dostali k požadovanému číslu aplikace.

4. Provádění aplikace:

Držte přístroj ve vlhké ruce tak, že prsty jsou v plném kontaktu s chromovou destičkou a přitlačte hlavici nástavce na obličej, pokožku hlavy nebo těla. Přístroj pípně jednou, dvakrát nebo třikrát na znamení, že se sám nastavil na vaši pokožku. Začněte zlehka masírovat pouze tam, kde jste aplikovali produkt. Přístroj pípně každých 10 vteřin na znamení, až do konce

zapnutí a v provozu. Jakmile do konce aplikace zbývá 30 vteřin, přístroj bude pípat každých 5 vteřin až do aplikaci.

Nezapomeňte držet přístroj v neustálém kontaktu s vaší pokožkou. Jakékoli oddálení přístroje od pokožky přeruší galvanický proud a tím přeruší aplikaci. V tomto případě bude podsvícení displeje blikat a přístroj přestane pípat až do doby, než bude obvod obnoven. Pouze pro zevní použití. Vyhněte se přímému kontaktu s okolím očí, rtů a úst.

Rádi bychom vás upozornili, že Nu Skin Galvanic Spa System® II Facial Gels (pleťové gely) jsou dvoufázovou procedurou. Až projdete všechny výše uvedené kroky pro Facial Pre-Treat Gel (předošetřující gel na obličej) zopakujte kroky 2-4 pro Facial Treatment Gel (ošetřující gel na obličej).

5. Ukončení aplikace:

Na konci aplikace uslyšíte zvuk pro „ukončení aplikace“ a z displeje zmizí hodiny a počet minut. Přístroj vypnete několikanásobným stisknutím tlačítka pro volby, dokud nebude displej prázdný. Pro pleťové gely a gel pro tvarování postavy odstraňte zbytky produktu ze své pokožky čistým, vlhkým hadříkem. Pro Tru Face® Line Corrector nebo Nutriol® zbytky produktu vmasírujte do pokožky, tyto produkty zůstávají na pokožce nanesené. Uvolněte nástavec pevným stisknutím uvolňovacího tlačítka a opatrným vytažením nástavce z přístroje. Očistěte přístroj a nástavec vlhkým hadříkem.

Uchovávejte přístroj Nu Skin Galvanic Spa System® II na suchém místě bez nástavce nasazeného na přístroji.

Podrobný návod pro aplikaci naleznete v uživatelské příručce umístěné na CD-ROMu, který je dodáván společně s přístrojem Nu Skin Galvanic Spa System® II nebo v knihovně Office. Používejte pouze v souladu s návodem.

